



集中治療室用ガートル台

取扱説明書

1. 安全上の注意

- 1) 使用目的以外に使用しないでください。
- 2) 本品の各部に破損又は変形等の異常がみられたときは使用しないでください。
- 3) 耐荷重（フック 1 個の耐荷重は最大 2kg、全体の耐荷重は 80kg（静止時））以上の無理な力がかからないようにしてください。転倒するおそれがあります。
- 4) 重量のある機器は、可能な限りベースとセンターポールに近い位置に固定してください。
- 5) 輸液ポンプ等は、常にセンターポール側に、左右のバランスが可能な限り均等になるように取り付けてください。
- 6) 移動する際は、フックの高さを下げ、キャスターのロックが解除されていることを確認してください。特に、段差、柔らかな床面、傾斜のある場所を移動する際は、転倒しないよう注意してください。
- 7) 使用・保管する際は、必ずキャスターのロックをかけてください。
- 8) 平らな場所でご使用ください。
- 9) 構成部品は純正品をご使用ください。

2. 製品概要

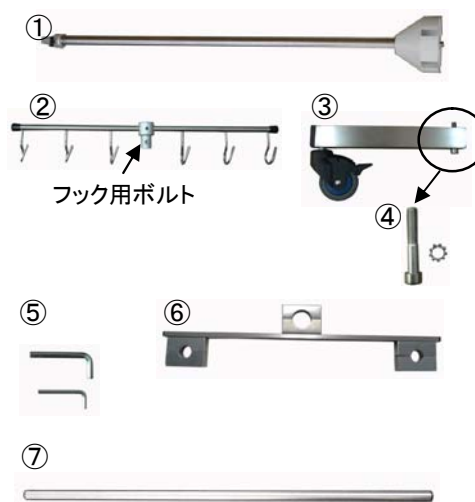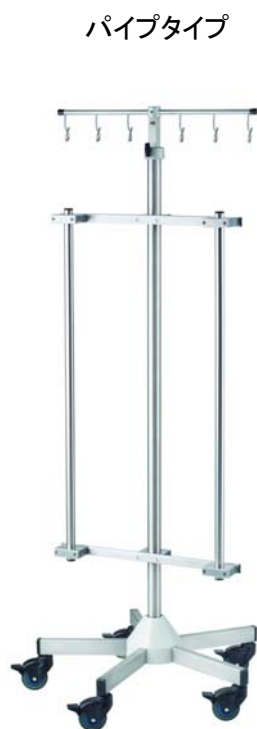

構成品	数量
①センターポール（高さ調節ネジ付）	1
②6ヶ掛けフック及びフック用ボルト	各 1
③脚部（ロック付キャスター）	5
④ボルト及びワッシャー	各 5
⑤六角レンチ（大,小）	各 1
⑥ポールフレーム	2
⑦ポール	2


3. 組立・設置方法



注意


一連の作業は平らな台上に置いて行ってください。

- 1) ポールフレームのクランプのボルト（各 2 本）をゆるめて外します（1 本につきクランプ 3 箇所）。

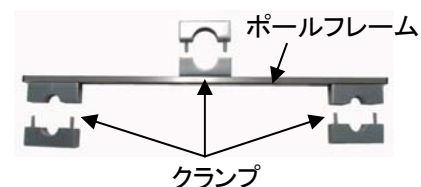

- 2) ポールフレームをポールの長さ分だけ間隔をあけて平らな台上に置いてください。

- 3) ポール 2 本を右図のようにクランプに載せます。

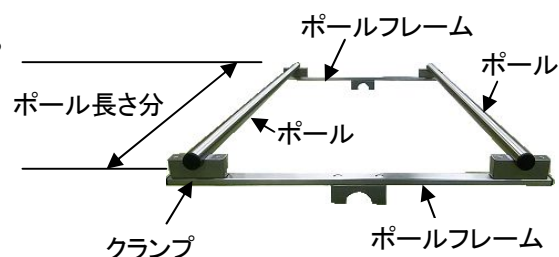

- 4) 再度、クランプを取り付け、ボルト（各 2 本）を仮締めしてポールを固定します。



注意

この段階では、ボルトは最後まで締めないでください。



- 5) 全体をひっくり返して、中央にセンターポールを置きます。



- 6) クランプ（3 箇所）のすべてのボルトをしっかりと締めて、ポール及びセンターポールを固定します。




7) 脚部を組み立てます。

脚部をセンターポールのベース部に差し込み、六角レンチ（大）でワッシャーとボルトを取り付け固定します。ワッシャーとボルトは図のように差し込んでください。



⚠ 注意

ベース部中心のボルトが確実に締まっていることを確認してください。

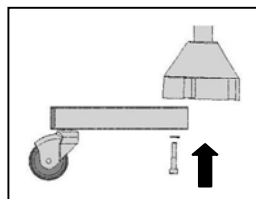

8) 脚部の組み立てが終わったら、ガートル台を立てます。

9) 6ヶ掛けフックをセンターポールの上から挿入し、六角レンチ（小）でフック用ボルトを取り付け固定します。

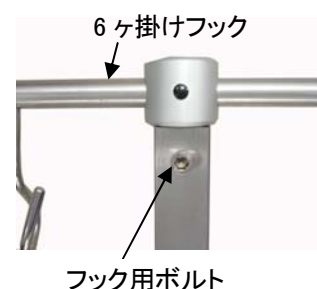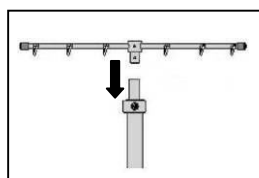

4. 使用方法とその注意事項

センターポールの高さ調節ネジを反時計回りに回して必要な高さに調整し、時計回りに回して固定します。

⚠ 注意

高さを調整する際は、センターポールが落下しないように一方の手でしっかりと持ち、もう一方の手で高さ調節ネジを回してください。指をはさみこまないよう注意願います。

⚠ 注意

ご使用前に、ベースががたつかないこと、キャスターがスムーズに回転すること、構成品に破損・変形等がないことをご確認ください。



5. 清掃、保管方法に関する事項

アルコールで湿らせた柔らかい布で軽く拭いてください。

6. 仕様

材質：ステンレス製

全高：1690～2200mm

重量：約 25kg（レールバー1 本時）

最大耐荷重：80kg（静止時）

ベース径：φ 680mm

支柱径：下部 φ 38mm、上部 φ 25mm

キャスター：φ 80mm, 全輪ロック付 フック：6 個（フック耐荷重；1 個につき 2kg）

7. 連絡先

販売元：村中医療器株式会社

〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野二丁目 8 番 2 号

TEL 0725-53-5546

<http://www.muranaka.co.jp>

注文コード	品番	商品名
030-121-32	I-PB2226	集中治療室用ガートル台(ハ イ° タイ°)

8. 保証

保証規定

- 取扱説明書・本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で、お買い上げ日より一年以内に故障した場合、無償修理いたします。
- 無償修理期間内でも次の場合には有償修理になります。
 - 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷。
 - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や電源の異常、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷。
- (ニ) 本書の提示がない場合。
- (ホ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書替えられた場合。
- (ヘ) 消耗部品。
- (ト) 故障の原因が本品以外に起因する場合。
- (チ) その他取扱説明書に記載されていない使用方法による故障及び損傷。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
- 本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。したがって、この本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

品質保証書

このたびは、集中治療室用ガートル台 をお買い求めいただきありがとうございました。本品は厳重な検査を行い、高品質を確保しております。しかし通常のご使用において、万一不具合が発生した場合は、保証規定により、お買い上げ日より一年間は無償修理いたします。

※製品の保証は日本国内での使用に限ります This warranty is valid only in Japan.

※以下につきましては必ず販売店にて記入捺印をお受けください。

商品名：集中治療室用ガートル台
ご芳名

ご住所

TEL. ()

お買い上げ店名

印

住所

TEL. ()

お買い上げ日 年 月 日

販売元：村中医療器株式会社

〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野二丁目8番2号 TEL 0725-53-5546